

BESTILLINGSINFO

ETHOS LP & ETHOS LP EVAQ8 VOKSNE

1 Velg størrelse

K-Level	K3
Vekt	485g (26cm Cat 4, modul med fotskall)
Byggehøyde*	22 - 25 cm = 2.26" / 57mm
	26 - 28cm = 2.3" / 58mm
	29 - 30cm = 2.48" / 63mm
Hælhøyde	3/8" / 10mm

ETHOS LP og
EVAQ8 er
tilgjengelig i
størrelsene 26-30

2 Velg stivhetskategori

Valg av fotkategori for ETHOS LP for voksne basert på pasientens vekt og aktivitetsnivå

Vekt	lb	100-115	116-130	131-150	151-170	171-195	196-220	221-255	256-285	286-325	326-365
	kg	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Aktivitetsnivå	Lavt	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Normalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
	Høyt	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-

ETHOS LP BARN

K-Level	K4
Vekt	275g (20cm Cat 2P, modul med fotskall)
Byggehøyde*	19 - 21 cm = 1.66" / 42mm
Hælhøyde	3/8" / 10mm

1 Velg stivhetskategori

Valg av fotkategori for ETHOS LP til barn basert på pasientens vekt og aktivitetsnivå

Vekt	lb	<58	59-79	80-100	102-132
	kg	<26	26-36	36-45	46-60
Aktivitetsnivå	Høyt	1P	2P	3P	4P

*Basert på størrelsene 20 kat. 2P, 23, 26, 29, kat. 4, med fotkappe, Spectra-sokk og 10 mm hælhøyde



ETHOS™ LP

LAVPROFIL PÅ
SITT BESTE


En dynamisk og slitesterk
fot som overgår
forventninger – og setter
en ny standard for styrke
og ytelse i
lavprofil-løsninger.

alfimed

ETHOS™ LP

LAV BYGGEHØYDE. HØY
YTELSE. STOR KAPASITET.

Opplev en **dynamisk lavprofilfot** med **jevn rulling** og **optimal energiretur**.

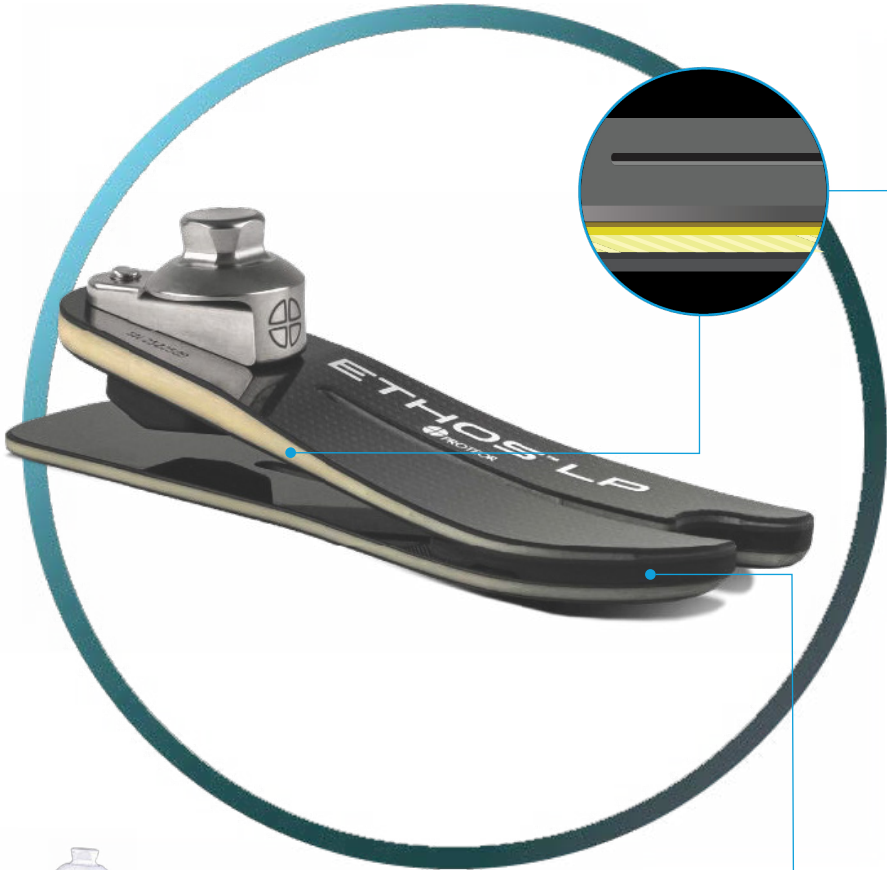

FUSIONFLEX KOMPOSITTEKNOLOGI

Et trelags komposittdesign som kombinerer holdbarhet og respons for maksimal ytelse

Den ultimate lavprofiløsningen med **glassfiberkjerne** for holdbarhet og **ytte lag av karbonfiber** for økt energiretur.



BEVEGELSE GJORT ENKELT:
± 8° ved aksial rotasjon
± 16.5° ved inversjon og eversjon

MULTIAKSIAL TORSJONSSPLATE

En spesialutviklet gummiblanding som er spesielt laget for økt komfort, trygghet og bevegelsesfrihet

- En selvstendig funksjon som gir aksial rotasjon, inversjon, eversjon og bevegelse i hælen og keel. Utviklet for maksimal fleksibilitet for **bedre tilpasning til underlaget** og **Reduserer indre og ytre rotasjonskrefter**




SAMMENLIGNET MED ANDRE STANDARD LAVPROFILALTERNATIVER°

2X
INVERSJON OG
EVERSJON




20%
LETTERE

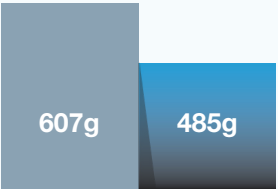

Snitt hos konkurrenter
ETHOS LP

17%
LAVERE BYGGEHØYDE

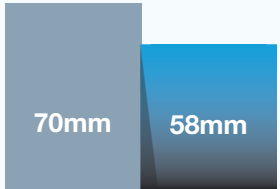

Snitt hos konkurrenter
ETHOS LP

SAMMENLIGNET MED TIDLIGERE LAVPROFILFOT RAPPORTERTE PASIENTER:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Jevnere rulling | 5 Bedre kontroll i ulendt terreng |
| 2 Forbedret inverjon og eversjon | 6 Enklere å gå baklengs |
| 3 Forbedret holdbarhet | 7 Mindre smerter |
| 4 Føles merkbart lettere med god støtdemping | |

MED EKSTRA PÅLITELIGE DESIGNDETALJER



Ingen bolter
Fjerner dødpunkter



Halv rocker-såle
Utviklet for å gi konstant kontakt med underlaget, for jevn rulling og optimal tilpasning til bakken.



Splittet forfot og hæl
Tilpasser seg ujevnt terreng, skråninger og hindringer på bakken.



Hældemper
Støtdempende hæl med høy energiretur.



Vannfast
Tåler ferskvann, sjøvann og klorvann