

alfimed

POINT DESIGNS
Fingerproteser





Innehåll

4-6	Point Digit, Point Digit Mini
8-9	Point Partial
10	Point Thumb
11	Point Endo
12-13	Point Pivot +

POINT DIGIT & POINT DIGIT MINI

Point Digit är en mekanisk, passiv och robust fingerprotes med rörliga leder.

Point Digit är en robust, passiv fingerprotes med rörliga leder, utvecklad för att vara både lätt och stark. Den har en innovativ spärrmekanism som låser i 11 olika böjvinklar, vilket ger användaren ökad mångsidighet och kontroll. Protesfingrarna är utvecklade av Point Designs och är idealiska för personer som har förlorat ett eller flera fingrar och behöver en slitstark lösning som möjliggör enhandsanvändning och justerbara böjvinklar.

Protesen är tillverkad av titan och rostfritt stål och levereras med all nödvändig utrustning för sömlös integration i en proteshylsa. Point Designs fingerproteser produceras i lättviktstitan med delvis ihålig konstruktion, med hjälp av en avancerad tillverkningsprocess baserad på direkt metall-lasersinträng (DMLS). Denna moderna tillverkningsmetod säkerställer hög styrka, precision och hållbarhet.



Produktfunktioner


- Upp till 11 låsbara böjvinklar.
- Hög styrka: Tål belastning upp till 68 kg.
Låg vikt: 20 g–36 g, beroende på längd.
- Anatomisk rotation runt patientens MCP-led.
- Kan manövreras med en hand.




Art.nr.	Modell	Längd
914028080	Point Digit	80 mm
914028085	Point Digit	85 mm
914028090	Point Digit	90 mm
914028095	Point Digit	95 mm
914028100	Point Digit	100 mm
914028105	Point Digit	105 mm
914128000	Monteringskit, höger hand	-
914088000	Monteringskit, vänster hand	-
914018900	1 års förlängd garanti – Point Digit	-

Art.nr.	Modell	Längd
914018055	Point Digit Mini	55 mm
914018060	Point Digit Mini	60 mm
914018065	Point Digit Mini	65 mm
914018070	Point Digit Mini	70 mm
914018075	Point Digit Mini	75 mm
914128000	Monteringskit, höger hand	-
914088000	Monteringskit, vänster hand	-
914018900	1 års förlängd garanti – Point Digit Mini	-

POINT DIGIT & POINT DIGIT MINI

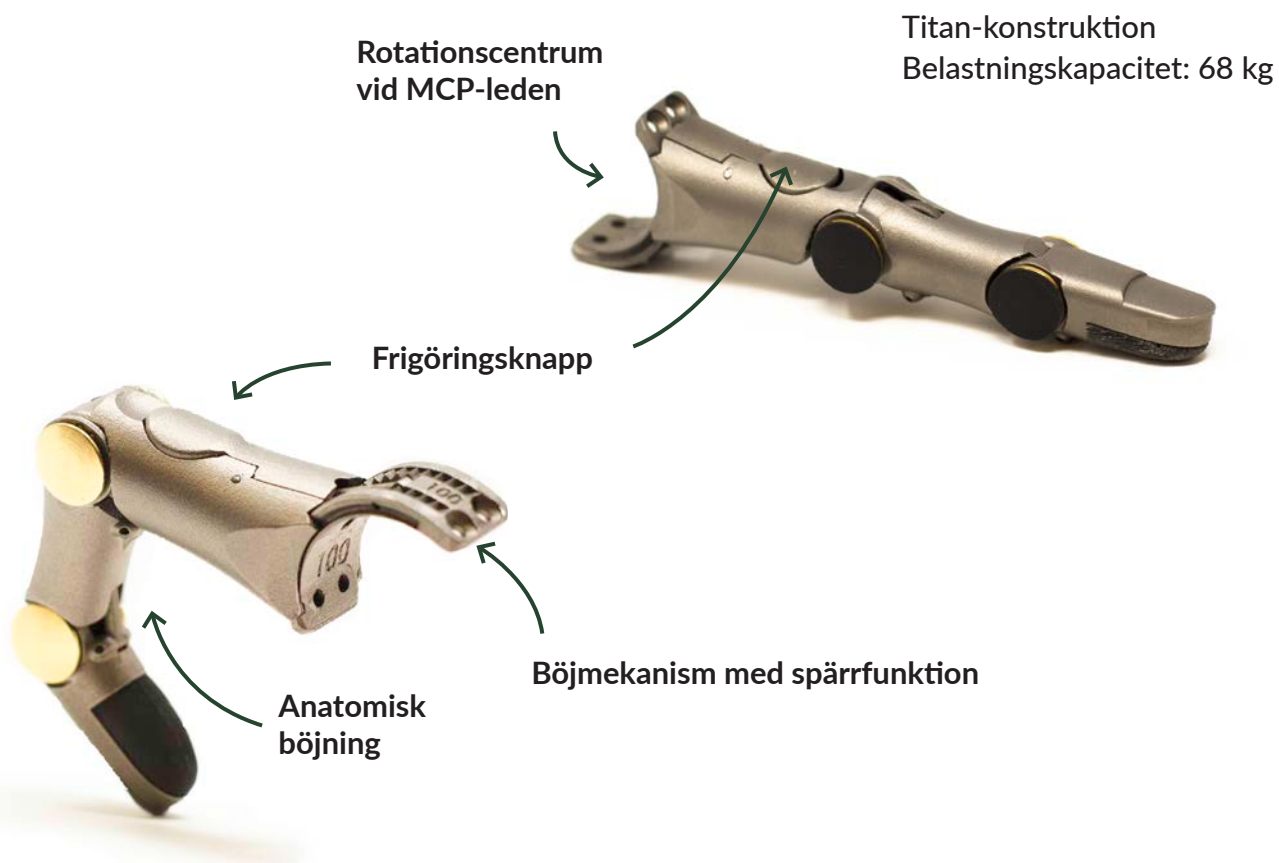

Monteringskit

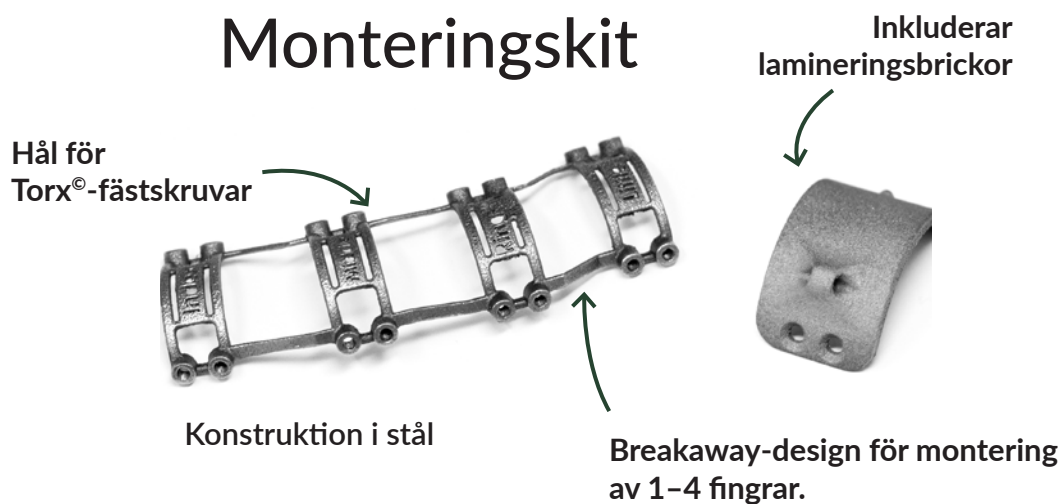

Point Digit finns i 6 längder
Point Digit Mini finns i 5 längder



POINT PARTIAL

Point Partial – Lätt, slitstark och flexibel fingerprotes

Point Partial är en mekanisk, passiv fingerprotes med rörliga leder, utvecklad för att vara både lätt och stark. En ny patenterad spärrmekanism låser protesen i sju unika böjvinklar.

Finns i tre längder: 45, 50 och 55 mm, mätt från centrum av PIP-leden till fingertoppen. Låg vikt, 15–20 g beroende på längd. Tillverkad av titan och rostfritt stål. Fingertoppen är kompatibel med touchskärmar.


Monteringskit för integration i protes beställs separat.

Point Partial är utvecklad för personer med delvis fingeramputation som behöver en slitstark lösning med enhandsanvändning och flera böjvinklar.




Produktfunktioner

- Patenterad spärrmekanism låser fingret i sju unika böjvinklar.
- Väger endast 15–20 g, tillverkad av titan och rostfritt stål.
- Fingertoppen är designad för smidig användning med touchskärmar.
- Finns i tre längder (45, 50 och 55 mm) för optimal komfort och funktion.

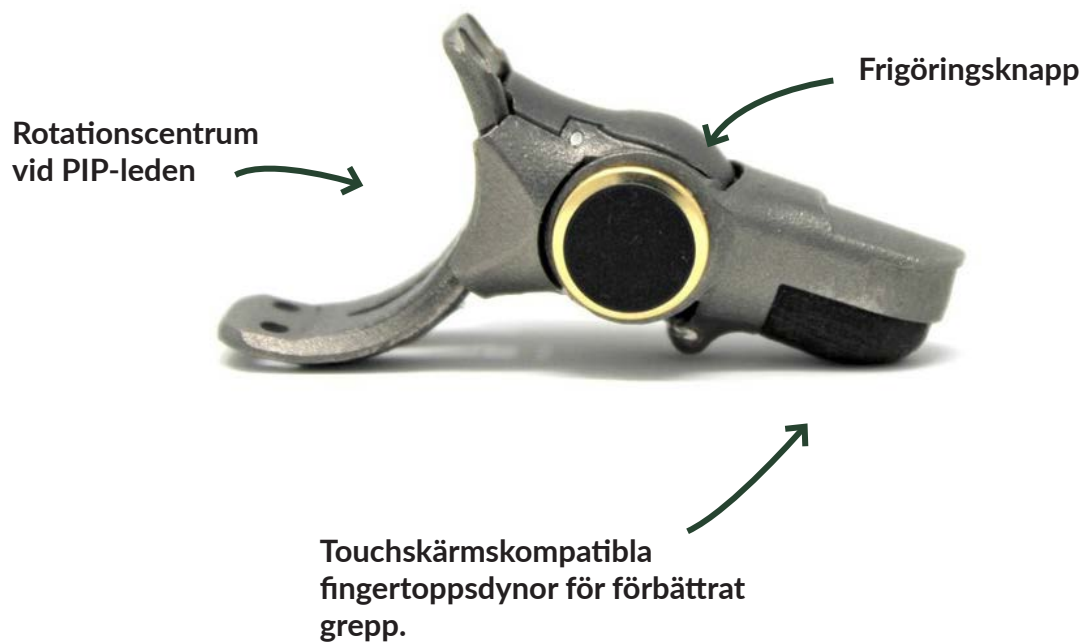

Monteringskit

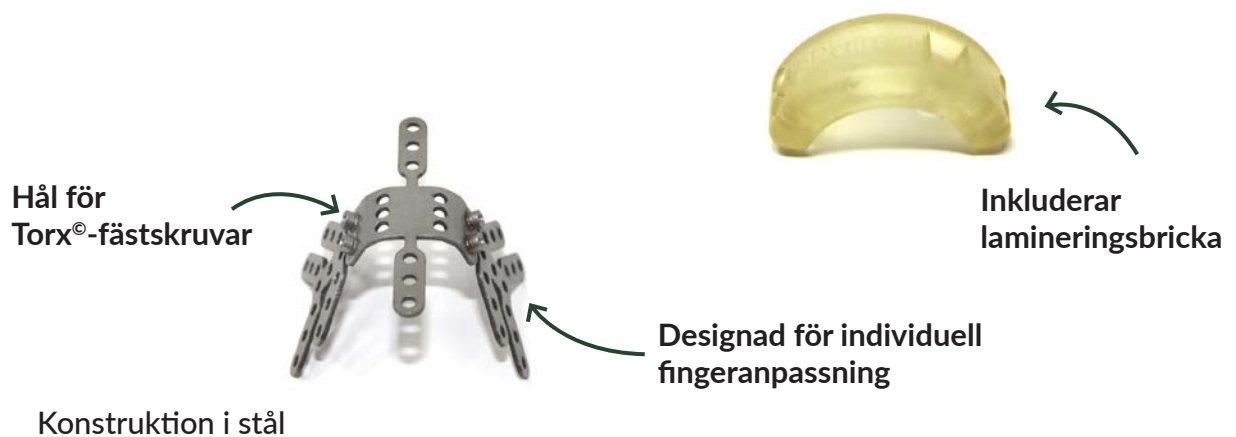

Art.nr.	Modell	Längd
914029045	Point Partial	45 mm
914029050	Point Partial	50 mm
914029055	Point Partial	55 mm
914027045	Monteringskit för Point Partial 45 mm	-
914027050	Monteringskit för Point Partial 50 mm	-
914027055	Monteringskit för Point Partial 55 mm	-
914029000	1 års förlängd garanti – Point Partial	-

POINT THUMB

En slitstark och justerbar tumprotes

Point Thumb är en mekanisk, passiv tumprotes med rörliga leder, utvecklad med en kombination av låg vikt och hög styrka. Den använder en ny patenterad spärrmekanism som kan låsas i 11 olika böjvinklar.

Denna tumprotes är utvecklad för patienter med tumamputation som behöver en slitstark lösning med enhandsanvändning och justerbara böjvinklar.

Finns i tre längder: 59, 66 och 73 mm, mätt från mitten av MCP-leden till fingertoppen. Låg vikt, 28–38 g beroende på längd.

Protesen är tillverkad av titan och rostfritt stål. 2 års garanti med möjlighet till förlängning upp till maximalt 5 år. Monteringskit för integration i protes beställs separat.



Art.nr.	Modell	Längd
914018059	Point Thumb	59 mm
914018066	Point Thumb	66 mm
914018073	Point Thumb	73 mm
914089059	Monteringskit för Point Thumb 59 mm	-
914089066	Monteringskit för Point Thumb 66 mm	-
914089073	Monteringskit för Point Thumb 73 mm	-
914019000	Point Thumb Monteringskit	-



POINT ENDO

En mekanisk fingerprotes med två rörliga leder, utvecklad för integration i silikonbaserad kosmetik.

Point Endo är en mekanisk fingerprotes med två rörliga leder, specifikt designad för integration i silikonbaserad kosmetik. Den är avsedd för lätt till måttlig belastning och har en smal profil med en slät yttre yta. Finns i fyra längder. Belastningskapacitet: 68 kg. Tillverkad av titan.

Monteringskit för integration i protes beställs separat.

Art.nr.	Modell	Längd
914518080	Point Endo	80 mm
914518085	Point Endo	85 mm
914518090	Point Endo	90 mm
914518095	Point Endo	95 mm
914518901	Monteringskit Point Endo, vänster	-
914518902	Monteringskit Point Endo, höger	-
914519000	1 års förlängd garanti – Point Endo	-

POINT PIVOT+

Ett dynamiskt monteringsystem för bättre funktion i Point Thumb.

Point Pivot+ är ett dynamiskt monterings-system som möjliggör flera rörelsegrader i Point Thumb. Som ersättning för standard-monteringsystemet för Point Thumb erbjuder Point Pivot+ många funktionella fördelar för användaren. Monterings-systemet gör det möjligt för Point Thumb att röra sig från opposition till lateral position. Dessutom möjliggör det rotation av flexions-/extensionsplanet på Point Thumb, vilket ger ett större spektrum av funktionella grepp.


2 års garanti, med möjlighet till förlängning upp till maximalt 5 år.




Produktfunktioner

- Låter Point Thumb röra sig från opposition till lateral position.
- Möjliggör rotation av flexions-/extensionsplanet och ger ett större spektrum av funktionella grepp.
- Ger flera rörelsegrader för förbättrad funktion och komfort.
- Levereras med 2 års garanti, med möjlighet till förlängning upp till 5 år.

ADDUKTION/ABDUKTION

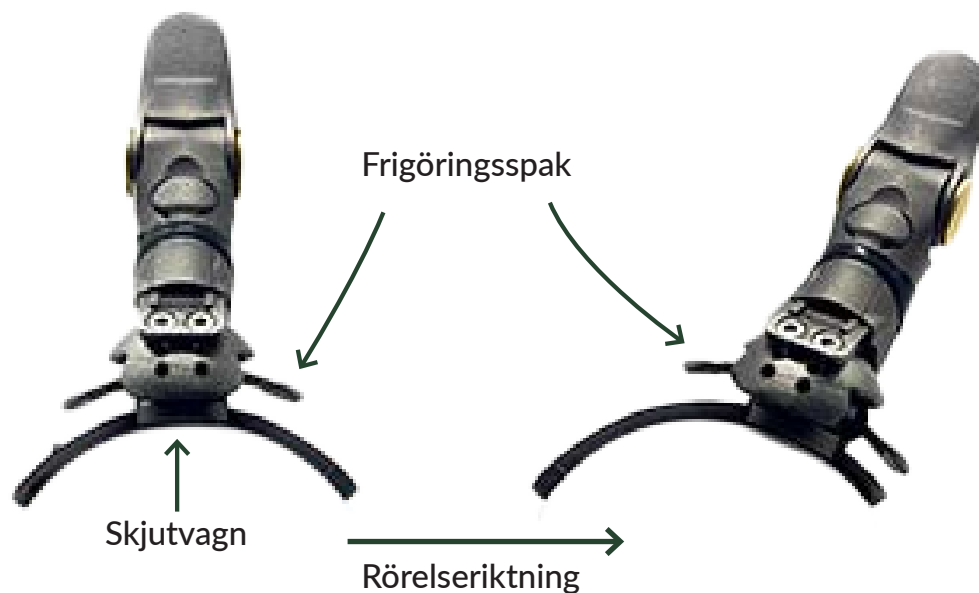


ROTATION

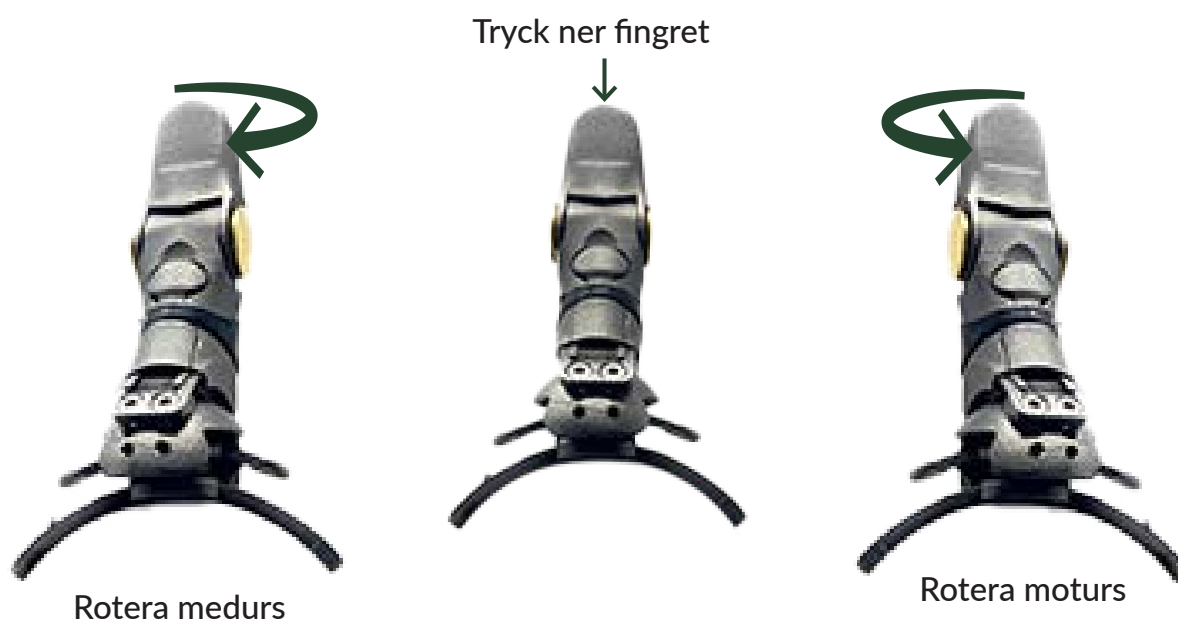

Art.nr.	Modell
914520000	Point Pivot+
914520100	Monteringskit till Point Pivot+
914529000	1 års förlängd garanti – Point Pivot+

[illegible]



Din partner inom ortopedteknik

Alfimed erbjuder expertis och ett brett sortiment av ortopedtekniska produkter, från protesdelar till specialmaterial, för den skandinaviska marknaden. Med över 10 000 artiklar på lager och snabba leveranser gör vi din arbetsdag enklare – så att du kan ge patienter bästa möjliga behandling.

Vi är mer än en leverantör – vi är en pålitlig samarbetspartner med hög tillgänglighet, snabba svar och lösningar som fungerar i praktiken.

Kontakta oss idag för att hitta rätt ortopedtekniska lösningar för din verksamhet.



alfimed

Alfimed AB | Karbingatan 38 254 67 Helsingborg, Sverige | 31 29 68 86 | info@alfimed.se