

Sleeves & Liners



alfimed

www.alfimed.no, Tlf. 31296886, Epost: info@alfimed.no

SLEEVES

Encore Summit Sleeve

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Encore Summit Sleeve er designet for komfort og ytelse. Den er laget av en proprietær blanding av thermoplastisk gel og mineralisk olje av medisins karakter, noe som gir en svært høy slitestyrke og varig elastisitet.

Encore Summit Sleeve tilbys i to ulike blandinger av thermoplastisk gel;
Activ Gel

Designet for aktivitet er denne svært responsiv. Velg Activ Gel for høy ytelse under aktivitet og for god kontroll ved bevegelse.

Relax Gel

Designet for komfort gir denne en mykere og mer fleksibel følelse både ved bevegelse og hvile.


Encore Summit Sleeve inkorporerer en ultrasterk tekstil som ikke nupper, føles myk og lukseriøs, samtidig som den tåler langtidsbruk.

Tilbys i 3 farger; Tan, Black og Steel Grey

Tilgjengelig i 2 gel tykkelser; 2 mm og 3 mm

Tilgjengelig i 5 størrelser, alle med lengde 35,5 cm.

ARTIKKELNUMMER

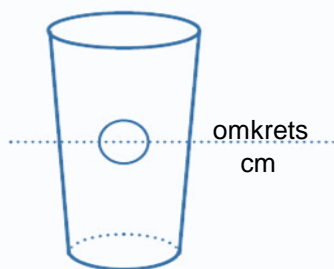

	Farge	Gel tykkelse	Gel type	Str i cm
821	Tan = 2 Black = 4 Steel Grey = 5	2mm = 02	Active = 1	23 (XS)
			Relax = 2	27 (S)
		3mm = 03	Aktive = 1	31 (M)
				37 (L)
				43 (XL)

Eksempel:

821203131 = Summit Sleeve, Tan, 3mm Activ Gel, str 31

Encore Meridian Sleeve

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Encore Meridian Sleeve er laget spesielt med tanke på brukere som har stor slitasje på sleeveen. Designet med en innebygget sleeve protector gir denne sleeveen høy komfort og slitestyrke.


Encore Meridian Sleeve tilbys i Relax gel, en mykere blanding av thermoplastisk gel.

Encore Meridian Sleeve er produsert i en ultrasterk tekstil både utvendig og innvendig. Dette resulterer i en sleeve som føles myk og lukseriøs samtidig som den er svært slitesterk.

Farge

Kommer i svart utførelse, 3 mm gelykkelse og 11 størrelser (alle i 38 cm lengde)

ARTIKKELNUMMER

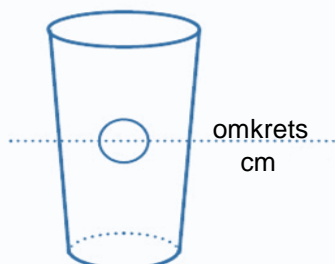

8254032XX


Erstatt XX med ønsket størrelse i cm

Str i cm	
23 (XS)	37 (L)
25 (XS+)	40 (L+)
27 (S)	43 (XL)
29 (S+)	49 (XXL)
31 (M)	55 (XXXL)
34 (M+)	

SLEEVES

Encore Prime Sleeve


KOMPONENT

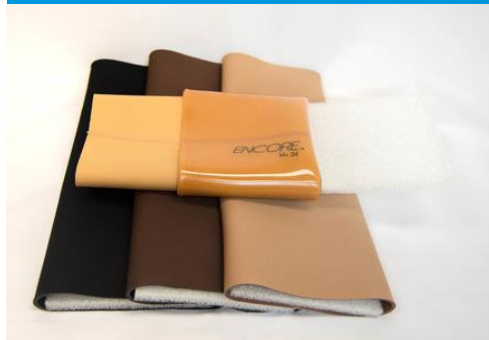

BESKRIVELSE

Encore Prime Sleeve er designet for økt slitestyrke og komfort. Dette oppnås ved bruk av et nytt avansert teknisk stoff som gir en bedre gelbinding. Thermoplastisk gel beriket med mineralsk olje av medisinsk karakter sikrer varig komfort. Encore Prime Sleeve tilbys i to ulike blandinger av thermoplastisk gel; *Activ Gel* og *Relax Gel*. Encore Prime Sleeve inkorporerer et ultrasterk teknisk stoff som føles myk og lukseriøs, samtidig som den tåler langtidsbruk. Tilbys i 4 farger; Beige, Tan, Brown og Black, 11 størrelser (alle i 38 cm lengde) og 2 gel tykkelser (2 mm og 3 mm)

ARTIKKELNUMMER

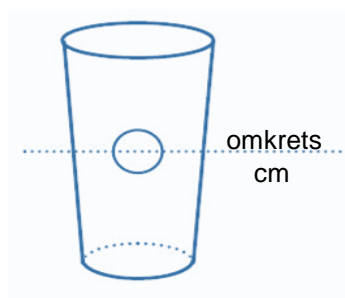

822

Farge	Gel tykkelse	Gel type	Str i cm	
Beige = 1	2mm = 02	Active = 1	23 (XS)	37 (L)
Tan = 2		Relax = 2	25 (XS+)	40 (L+)
Brown = 3	3mm = 03	Active = 1	27 (S)	43 (XL)
Black = 4			29 (S+)	49 (XXL)
			31 (M)	55 (XXXL)
			34 (M+)	

Eksempel:

822303131 = Prime Sleeve, Brown, 3mm Activ Gel, str 31

ALPS Flex Sleeve

KOMPONENT



BESKRIVELSE


ALPS Flex Sleeve (SFX) er laget i en sømløs strikket konstruksjon i HD Gel for å gi maksimal komfort. SFX har en 30 ° preflektert fasong som minimerer krølling i knehasen

Egenskaper

- er 30 ° preflektert
- HD Gel gir pasienten stor grad av kontroll og komfort
- 3 mm gel-tykkelse.
- grå eller beige
- en lengde som passer de fleste



ARTIKKELNUMMER

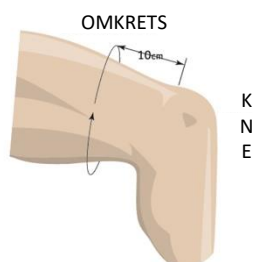

K
N
E

Størrelse	3 mm grå	3 mm beige
20 (30-34 cm)	802021320	802022320
26 (31-40 cm)	802021326	802022326
32 (35-60 cm)	802021332	802022332

SLEEVES

ALPS Superior Suspension Sleeve

KOMPONENT




BESKRIVELSE

ALPS Superior Suspension Sleeve har overlegen komfort takket være ALPS Gel. Sleeveen har et nytt svart strikket stoff som gir brukeren utmerket frihet i knebøyning. Det oppnås en sikker suspensjon ved at gelen fester seg til huden uten å hemme sirkulasjonen. Den tynne profilen gjør dette til et ideelt valg for de som er opptatt av at sleeveen ikke bygger for mye.

- Finnes med Alps Grip Gel og Alps High Density Gel
- 2mm tykkelse



ARTIKKELNUMMER

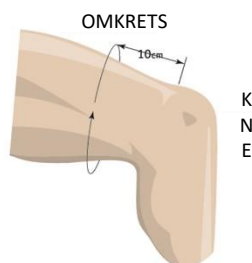

Størrelse

20 (25 – 30 cm)
24 (31 – 34 cm)
26 (35 - 37 cm)
28 (38 – 40 cm)
32 (41 - 45 cm)

Grip Gel

802010320
802010324
802010326
802010328
802010332

HD Gel

802011320
802011324
802011326
802011328
802011332

ALPS EasySleeve – Fabric Reinforced

KOMPONENT




BESKRIVELSE

ALPS EasySleeve Fabric Reinforced med ALPS EasyGel er svært behagelig i bruk. Elastisiteten i materialet gir pasienten god bevegelse i kneet. Sleeveen gir også god suspensjon ved at den griper godt til huden uten å hemme sirkulasjonen. EasyGel viser seg også å gi mindre friksjon og dermed mindre ubehag.

- Sterkt og holdbart materiale.
- Inneholder en antioksidant spesielt egnet for sensitiv delikat hud
- Tilgjengelig i 3mm og 6mm tykkelser.
- 9 størrelser



ARTIKKELNUMMER

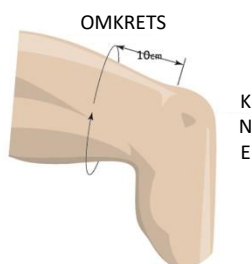

Størrelse

XS (20-24 mm)
S (25 – 30 cm)
M (31 – 34 cm)
M+ (35 37 cm)
L (38 – 40 cm)
XL (41 – 45 cm)
XXL (46 60 cm)
XXXL (61 – 70 cm)

3mm

802030316
802030320
802030324
802030326
802030328
802030332
802030338
802030344

6mm

802030616
802030620
802030624
802030626
802030628
802030632
802030638
802030644

SLEEVES

ALPS EasySleeve SuperStrech

KOMPONENT



BESKRIVELSE


ALPS EasySleeve SuperStretch er en sleeve som gir komfort og holdbarhet samtidig som den beholder sin sterke vakuum i hylsen. Sleeveen gir fri knebøyning, samt oppnår sikker suspensjon ved å tette mot huden uten å hemme sirkulasjonen.

Ved å bruke et eget stoffdeksel, er EasyGel SuperStretch i stand til å bevege seg med pasienten, og reduserer derfor trykket mot patella og tillater at hoveddelen av sleeveen forskyves vekk fra knehasen.

- Minimerer kompresjon og irritasjon proksimalt
- Lengre lengder for å passe flere pasienter
- Inneholder en antioksidant spesielt egnet for sensitiv hud
- Et stoffdeksel (selges separat) beskytter hylsen
- Anbefalt for vanntette proteser



ARTIKKELNUMMER

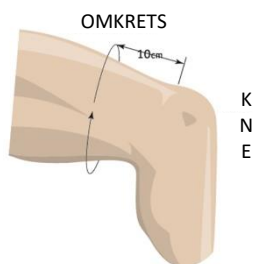

Størrelse	EasySleeve SuperStretch	Cover for EasySleeve
XS (20-24 mm)	802040616	802050016
S (25 – 30 cm)	802040620	802050020
M (31 – 34 cm)	802040624	802050024
M+ (35 37 cm)	802040626	802050026
L (38 – 40 cm)	802040628	802050028
XL (41 – 45 cm)	802040632	802050032

ALPS Extreme Sleeve

KOMPONENT




BESKRIVELSE

ALPS Extreme Sleeve har overlegen komfort takket være ALPS Grip Gel. Sleeveen har begrenset vertikal strekk, men stoffets elastisitet tillater fortsatt brukeren utmerket frihet til knebøyning. Sleeveen oppnår også sikker suspensjon ved å tette med huden uten å hemme sirkulasjonen, mens gelen fester seg til pasientens hud uten å forårsake friksjon. Gelen hjelper også til med å forhindre at hylsen ruller ned.

- Begrenset loddrett strekk
- Frihet på knebøyning
- Minimerer kompresjon og irritasjon proksimalt
- Gir en sikker suspensjon



ARTIKKELNUMMER

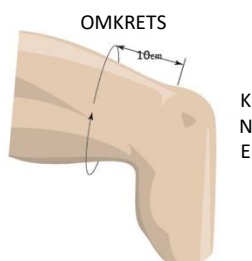

Størrelse	3mm	6mm
XS (20-24 mm)	802080316	802080616
S (25 – 30 cm)	802080320	802080620
M (31 – 34 cm)	802080324	802080624
M+ (35 37 cm)	802080326	802080626
L (38 – 40 cm)	802080328	802080628
XL (41 – 45 cm)	802080332	802080632
XXL (46 60 cm)	802080338	802080638
XXXL (61 – 70 cm)	802080344	802080644

SLEEVES

ALPS Superior Performance Sleeve

KOMPONENT



BESKRIVELSE

ALPS Superior Performance Sleeve er en sleeve konstruert med et nytt High Performance svart stoff og ALPS Gel.

Sleeven har begrenset vertikal strekk, men stoffets horisontale elastisitet gir fortsatt brukeren utmerket frihet til knebøyning.

Gelen fester seg til brukerens hud uten å forårsake friksjon og hjelper til med å forhindre at sleeveen ruller ned.

- Tilgjengelig med High Density Gel (HD) eller med Grip Gel
- Tilgjengelig i tykkelser på 3 mm og 6 mm
- High Performance stoff for mindre vertikal strekk
- Gir en sikker suspensjon



ARTIKKELNUMMER

Størrelse	3mm Grip Gel	6 mm Grip Gel	3 mm HD Gel	6mm HD Gel
XS (20-24 mm)	802070316	802070616	802071316	802071616
S (25 – 30 cm)	802070320	802070620	802071320	802071620
M (31 – 34 cm)	802070324	802070624	802071324	802071624
M+ (35 37 cm)	802070326	802070626	802071326	802071626
L (38 – 40 cm)	802070328	802070628	802071328	802071628
XL (41 – 45 cm)	802070332	802070632	802071332	802071632
XXL (46 60 cm)	802070338	802070638	802071338	802071638
XXXL (61 – 70 cm)	802070344	802070644	802071344	802071644

ALPS VIVA Sleeve

KOMPONENT



BESKRIVELSE

ALPS VIVA Sleeve er en gel sleeve med innebygd ventil for å slippe ut luft fra hylsen for å gi overlegen sikkerhet.

Det gir vakuum uten behov for å lage en ventil i hylsen.


Når hylsen er påsatt, skal ventilen være plassert proksimalt til patella for å skape mottrykk med knebøyning.

VIVA er laget med ALPS Grip Gel som forhindrer at hylsen ruller ned.

- Minimerer kompresjon og irritasjon proksimalt
- Frihet til knebøyning
- Innebygd ventil for å slippe ut luft
- Gir en sikker suspensjon



ARTIKKELNUMMER

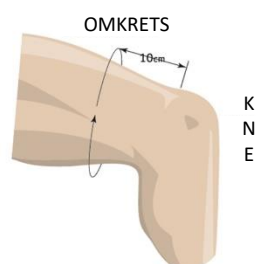

Størrelse	3 mm	6 mm
XS (20-24 mm)	802090316	802090616
S (25 – 30 cm)	802090320	802090620
M (31 – 34 cm)	802090324	802090624
M+ (35 37 cm)	802090326	802090626
L (38 – 40 cm)	802090328	802090628
XL (41 – 45 cm)	802090332	802090632

SLEEVES

DAW Cool Sleeve

KOMPONENT



BESKRIVELSE

COOL SLEEVE (tidligere G-SLEEVE) er en gel-sleeve med utvendig lycra-stoff. Myk og behagelig å sitte med. Den er helt tett, noe som gjør den også egnet for vakuumsylser.

Oppgitte mål er når sleeveen ligger flatt

Selges enkeltvis eller i 5-pakk

ARTIKKELNUMMER

Art.nr. stk	Art.nr. 5-pakk	Størrelse	Bredde oppe	Bredde nede
315061000	315065000	X-Small	12 cm	10 cm
315061001	315065001	Small	14 cm	12 cm
315061002	315065002	Medium	16 cm	14 cm
315061003	315065003	Large	19 cm	17 cm
315061004	315065004	X-Large	22 cm	20 cm

LINERS

Encore II Liner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

Encore II Liner er en myk allround liner designet for komfort og daglig bruk. I den nederste 1/3 distalt er laminert inn en «anti-strekk» matrix som hindrer strekk i huden. Den myke termoplastisk gelen er iblandet mineralolje for komfort og hudhelse. Encore II Liner er laget med 2 unike stoffkvaliteter. En ytterst som er veldig elastisk og en innerst i den distale delen som er uelastisk

- Fås både som Locking Liner og som Cushion Liner.
- 3 farger (Beige, Tan og Black)
- 9 størrelser
- 3 kombinasjoner av geltykkelse

ARTIKKELNUMMER

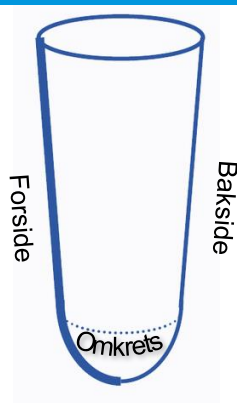

826

Farge	Gel tykkelse	Type	Str i cm	
Beige = 1	6/3mm = 63	Locking Liner = 3	16	26
Tan = 2	6/6mm = 66	Cushion Liner = 4	18	28
Black = 4	9/3mm = 93		20	31
			22	34
			24	

Eksempel:

826463420 = Encore II Liner Black 6/3mm Cushion Liner, str 20

Encore V Liner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

Encore V Liner er designet for maksimum komfort. En svært dempende termoplastisk gel beriket med mineralsk olje av medisinsk karakter, resulterer i en liner som gir optimal demping samtidig som slitestyrken ivaretas

Encore V Liner lages i to unike, svært myke tekstiler. Det lysere frontpanelet er et mykt stoff som kan strekkes i alle retninger. Det mørkere bakre panelet er i et tyngre stoff som er designet for å eliminere langsgående strekk.

- Fås både som Locking Liner og som Cushion Liner.
- 2 fargekombinasjoner; Tan/Brown og Steel Grey/Dark Grey
- 9 størrelser, alle i 46 cm lengde
- 4 kombinasjoner av gel-tykkelser

ARTIKKELNUMMER

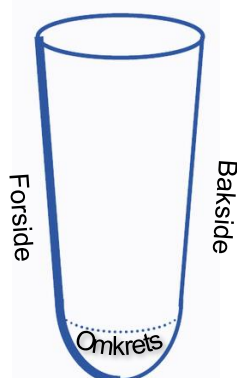

824

Farge	Gel tykkelse	Type	Str i cm	
Tan/Brown = 6	3/3mm = 33	Locking Liner = 3	16	26
	6/3mm = 63	Cushion Liner = 4	18	28
Steel Grey/ Dark Grey = 7	6/6mm = 66		20	31
	9/3mm = 93		22	34
			24	

Eksempel:

824663420 = V Liner, Tan/Brown 6/3 mm Cushion Liner, str 20

LINERS

ALPS Smart Seal Liner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

Alps Smart Seal Liner har et integrert bånd som griper fast i hylseveggen og sikrer en god og lufttett forankring mellom liner og hylse. Den myke innsiden sørger for god komfort og stabilitet uten å hemme blodsirkulasjonen.

- Integrert bånd som sikrer god forankring mellom hylse og liner
- Alps High Density Gel for god komfort og stabilitet
- Slitesterkt stoff og sømløst design
- Fåes både som cushion og locking
- Finnes i 3mm og 6mm tykkelse



ARTIKKELNUMMER

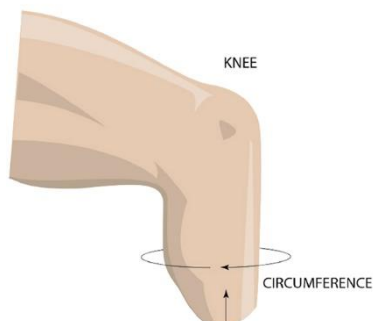

Str	Transfemoral Cushion	Transfemoral Locking	Transtibial Cushion
20		3mm 801012320 6mm 801012620	3mm 801013320 6mm 801013620
24		3mm 801012324 6mm 801012624	3mm 801013324 6mm 801013624
26	3mm 801011326 6mm 801011626	3mm 801012326 6mm 801012626	3mm 801013326 6mm 801013626
28	3mm 801011328 6mm 801011628	3mm 801012328 6mm 801012628	3mm 801013328 6mm 801013628
32	3mm 801011332 6mm 801011632	3mm 801012332 6mm 801012632	
38	3mm 801011338 6mm 801011638	3mm 801012338 6mm 801012638	

ALPS ECO Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Alps ECO Liner har et nytt distalt feste med redusert stretch som sikrer aktive brukere enda større grad av kontroll. Alps High Density Gel sørger for god komfort og stabilitet.

- Nytt distalt feste med redusert stretch gir aktive brukere enda større grad av kontroll.
- Alps High Density Gel for god komfort og stabilitet
- Fås som enten cushion eller locking liner
- Strikket slitesterkt stoff
- Sømløst design
- Finnes i 3mm og 6mm tykkelse



ARTIKKELNUMMER

	Type	Tykkelse i mm	Størrelse
80104	Cushion Liner = 1	3mm = 3	20, 24, 26, 28 eller 32
	Locking Liner = 2	6 mm = 6	

801041624 = Alps Eco Liner, Cushion , 6mm, str 24

LINERS

ALPS Extreme Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE


Alps Extreme Liner er en gel-liner spesielt designet for transfemorale og aktive transtibiale amputerte. Den er tilgjengelig i High Density Gel eller Grip Gel for å tilfredsstille behovene til de fleste pasienter.

Alps Extreme Liner har 80% mindre vertikal strekk enn andre gel-linere fra Alps, noe som gir mer kontroll og stabilitet.

- Tilbys med HD Gel eller Grip Gel
- Begrenset vertikal strekk reduserer bevegelse av bløtdeler og gir større kontroll over protesen
- Høy elastisitet i omkrets for å gi best mulig formltilpasning
- Distale ender er proporsjonale med størrelsen på lineren for enkel avtaging
- For transfemorale og aktive transtibiale amputerte



ARTIKKELNUMMER

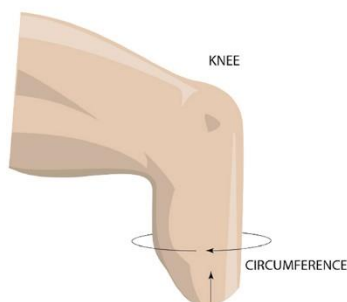

	Type	Tykkelse	Størrelse
80106	Cushion Liner	3mm = 3	16, 20,
	Grip Gel = 1	6mm = 6	24, 26,
	Locking Liner Grip Gel = 2		28, 32,
	Cushion Liner HD Gel = 3		38 eller
	Locking Liner HD Gel = 4		44

801064332 = Alps Extreme Locking Liner HD Gel, 3mm, str 32

ALPS General Purpose Liner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

General Purpose Liner med Alps Grip Gel kombinerer mykhet, elastisitet og slitestyrke, og sørger for god komfort og holdbarhet for brukeren.

- Alps Grip Gel for bedre mykhet og elastisitet
- Slitesterkt materiale og forsterkede sømmer for bedre holdbarhet
- Enkel å ta på og av
- Best egnet for brukere med sunn hud, eller brukere med lavere aktivitetsnivå
- Fås som både cushion liner og locking liner
- Finnes i 3mm og 6mm tykkelse



ARTIKKELNUMMER

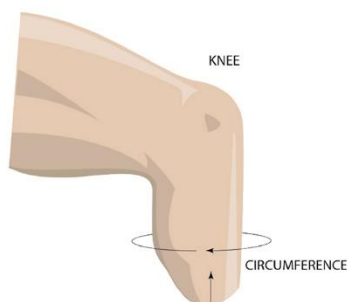

	Type	Tykkelse	Størrelse
80105	Cushion Liner = 1	3mm = 3	16, 20,
	Locking Liner = 2	6mm = 6	24, 26,
			28, 32,
			38 eller
			44

801052620 = Alps General Purpose Locking Liner, 6mm, str 20

LINERS

ALPS Superior Performance Liner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

ALPS Superior Performance gel liner er ideell for aktive amputerte.

- High Performance Fabric for mindre vertikal strekk og økt kontroll av protesen
- Tilbys med High Density eller Grip Gel
- Høy stretch i omkrets for å hjelpe til med formltilpasning
- HD Gel-versjonen er ideell for aktive amputerte og pasienter som går fra en silikon- til en gel-liner
- Tilgjengelig som Cushion Liner og Locking Liner
- 3 og 6 mm



ARTIKKELNUMMER

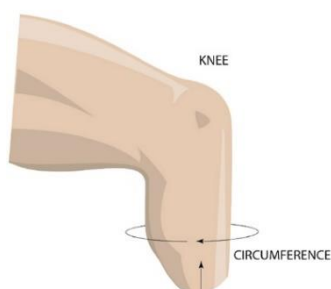

	Type	Tykkelse	Størrelse
80107	Cushion Liner	3mm = 3	16, 20,
	Grip Gel = 1	6mm = 6	24, 26,
	Locking Liner Grip Gel = 2		28, 32,
	Cushion Liner HD Gel = 3		38 eller
	Locking Liner HD Gel = 4		44

801074632 = Alps SP Locking Liner HD Gel, 6mm, str 32

ALPS EasyLiner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

Alps EasyLiner er spesielt egnet for brukere med sensitiv hud og hudirritasjoner. Den myke gel-overflaten er laget av Alps EasyGel som er svært myk og behagelig i forhold til tradisjonelle gel-linere. Den inneholder antioksidanter som fremmer frisk hud ved å forhindre hudskader og reparere skadet hud forårsaket av frie radikaler og hydroksyler. Denne unike kvaliteten gjør lineren til et godt valg for brukere med vaskulær sykdom, alvorlig diabetes, og brukere med skadet hud/arrvev.

- Fås som enten cushion eller locking liner
- Svært slitesterk med forsterkede sømmer
- God stretch
- Sterkt materiale for allsidig bruk
- Fås i tre tykkelser



ARTIKKELNUMMER

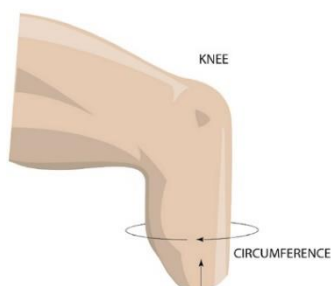

	Type	Tykkelse	Størrelse
80103	Cushion Liner = 1	3mm = 3	16, 20,
	Locking Liner = 2	6mm = 6	24, 26,
		6/3mm = 7	28, 32,
			38 eller
			44

801031726 = Alps EasyLiner, Cushion, 6/3 mm, str 26

LINERS

ALPS Anterior-Posterior Tapered Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE


ALPS Anterior Posterior Tapered Liner er gradvis tynnere fra foran til bak for å gi overlegen komfort for amputerte. Tilgjengelig i locking liner eller cushion liner.

Lineren har et svart, høy ytelse stoff med gel som hjelper til med å redusere sammenkrølling i knehasen.

- Konisk - 6 mm foran til 3 mm bak
- Reduserer krølling bak i knehasen.
- Svart stoff med høy ytelse
- Cushion og locking liner



ARTIKKELNUMMER

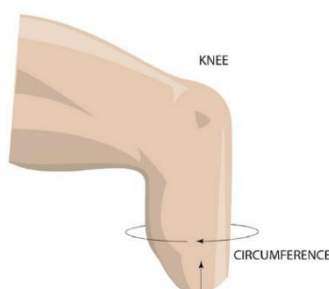

Størrelse	Cushion Liner	Locking Liner
20	801081720	801082720
24	801081724	801082724
26	801081725	801082726
28	801081726	801082728
32	801081732	801082732

ALPS EasyFlex Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE

ALPS EasyFlex Liner gjør det enkelt å bøye kneet gjennom en ubegrenset stretch på fremsiden.


På baksiden har stoffet 80% mindre loddrett strekk, noe som forhindrer at lineren klumper seg i knehasen.

ALPS EasyGel inneholder antioksidanter som bidrar til å fremme hudens helse, noe som også gir komfort og holdbarhet.

- To typer stoffer med ulik elastisitet for lettere knebøyning
- Distale ender er proporsjonale med størrelsen på lineren for enkel donning
- Inneholder en antioksidant som gjør den velegnet
- Med distalt feste for pinlås



ARTIKKELNUMMER

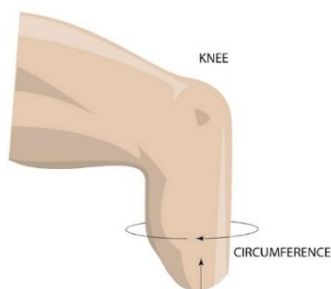

Størrelse	3 mm	6 mm
16	801102316	801102616
20	801102320	801102620
24	801102324	801102624
26	801102326	801102626
28	801102328	801102628
32	801102332	801102632
38	801102338	801102638
44	801102344	801102644

LINERS

ALPS Silicone PRO Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE


Alps Silicone PRO

Hudvennlig silikonliner med strikket sømløst design for god komfort og holdbarhet. Den minimale distale distraksjonen sørger for en behagelig tilpasning og best stabilitet for alle aktivitetsnivåer.

- Hudvennlig medisinsk silikon og tynn profil
- En femtedel av friksjonen i forhold til vanlig silikon
- Mykt strikket stoff i sømløst design for økt bevegelsesfrihet
- Fås både som locking liner og cushion liner
- 3 mm tykkelse
- Lett vekt
- Kjøleende effekt
- Redusert stemping uten distal begrensning



ARTIKKELNUMMER

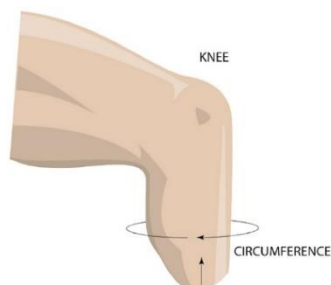

Størrelse	Cushion Liner	Locking Liner
20	801111320	801112320
22	801111322	801112322
24	801111324	801112324
26	801111326	801112326
28	801111328	801112328
30	801111330	801112330
32	801111332	801112332
35	801111335	801112335
38	801111338	801112338

ALPS Liberty Liner II

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Liberty Liner II slipper ut svette og luft gjennom en innebygd ventil enten gjennom pinnen eller reduksjonsskruen. Enveisventilen er strategisk plassert distalt for å slippe ut eventuell luft mellom brukerens hud og lineren.

- Gir overlegen passform
- Innebygd ventil
- Tilgjengelig både som Locking og Cushion Liner
- Tilgjengelig i 6 mm HD Gel i jevn tykkelse



Størrelse	Cushion Liner inkl. reduksjonsskure med ventil	Locking Liner inkl. pin med ventil
20	801021620	801022620
24	801021624	801022624
26	801021626	801022626
28	801021628	801022628
32	801021632	801022632

LINERS

ALPS SoftSil Liner

KOMPONENT




BESKRIVELSE

SoftSil er produsert med OptiSil, en ren og hypoallergen hvit silikon utviklet av ALPS®. Det grå stoffet har lav vertikal stretch. Versjonen med pinkobling har en ny distal paraply og en U-formet matrise for ekstra stabilitet.

SoftSil Liner tilbyr en perfekt balanse mellom tetthet og fleksibilitet og gir brukeren en høy grad av komfort, kontroll og stabilitet. I tillegg er SoftSil tynn og lett, og hjelper med hudens naturlige temperaturregulering. Fås i 3 mm gel-tykkelse og tilbys som enten cushion- eller locking-liner.



ARTIKKELNUMMER

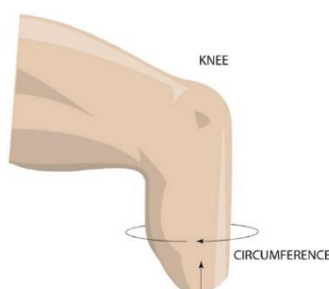

Størrelse	Cushion Liner	Locking Liner
20	801131320	801132320
22	801131322	801132322
24	801131324	801132324
26	801131326	801132326
28	801131328	801132328
30	801131330	801132330
32	801131332	801132332
35	801131335	801132335
38	801131338	801132338
41	801131341	801132341
44	801131344	801132344

ALPS ProFit Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE

ProFit har OptiGel, en spesialisert hvit gel som forbedrer protesens tilpasningsevnen til gjenværende lem ved å sikre en optimal passform.

- Versjonen med pinkobling har en ny distal paraply og en U-formet matrise for ekstra stabilitet. .
- Det grå stoffet har lav vertikal stretch
- Fås som enten cushion- eller locking-liner
- Tilgjengelig i enten 3 mm eller 6 mm tykkelse



ARTIKKELNUMMER

	Type	Tykkelse	Størrelse
80114	Cushion Liner = 1 Locking Liner = 2	3mm = 3 6mm = 6	20, 24, 26, 28, 32, 38 eller 44

801142326 = ProFit, Locking, 3 mm, str 26

LINERS

DAW Cool Liner 2.0

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Proteseliner laget av gel i forskjellige tykkelser med utvendig lycra stoff for mindre friksjon og slitasje mot protesehylsen. Er hudvennlig og inneholder mineraloljebasert gel som er beriket med vitamin A, D og E.

Modeller:

- UNIFORM = Tynnere geltykkelse på baksiden for bedre sittekomfort. Formbar ved 65°C, behold temperatur i en time, og la deretter avkjøles.
- TAPERED (konisk) = Konisk formet liner med et tykkere gellag i bunnen. Formbar ved 65°C, behold temperatur i en time, og la deretter avkjøles.

Begge modellene er tilgjengelige i vanlig versjon eller VSC (Vertical Stretch Control). VSC = Forsterket liner for aktive pasienter.

Tilgjengelig med eller uten pinkobling.

Se vår hjemmeside for artikkelnumre:

<https://alfimed.no/produkter/linere-og-sleever/liners-no/cool-liner-2-0-p61696>

ENCORE IV Liner

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Encore IV Liner er en enkel, godt konstruert klassisk liner som integreres godt i eksisterende systemer. Plysstoff sammen med fast gel gjør at denne lineren er svært allsidig.

Encore IV Liner-stoffet er mykt og slitesterkt. Det toveis elastiske stoffet gir mulighet for tilpasning rundt det resterende lemmet og gir bedre komfort.

- Tilgjengelig i fargen beige
- Tilgjengelig i elleve uniform størrelser. Også tilgjengelig som tapered i størrelse 18 og 20cm.
- Tilgjengelig i fire forskjellige geltykkelser, 3/3, 6/3, 6/6 og 9/3mm.
- Tilgjengelig som enten Cushion- eller Locking-liner

Se vår hjemmeside for artikkelnumre:


<https://alfimed.no/produkter/linere-og-sleever/liners-no/encore-iv-liner-p67834>

STUMPSTRØMPER

ALPS Prosthetic Socks

KOMPONENT

BESKRIVELSE

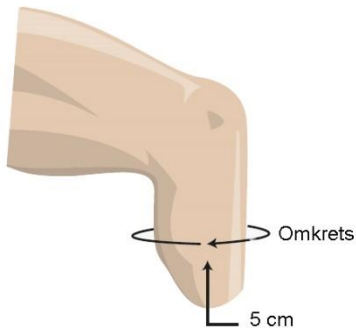

ALPS protesesokk er lett og myk. Gir demping og komfort for en overlegen passform.

Sokkene er tilgjengelige i 1, 3 og 5 ply, og er produsert med Coolmax®-fibre for å skape et fuktighetsstyringssystem som beveger svette bort fra kroppen og gjennom stoffet, hvor det kan fordampe raskt.

De har plass til volumfluktasjoner og kan brukes alene eller sammen med en protese.

- Coolmax®-fibre gir en kjølig, behagelig følelse
- Holder formen over tid med minimal strekk
- Praktisk fargekoding, Blå stripe på sokker med 1 ply gul stripe på 3 ply og grønn stripe på 5 ply.
- Sokker er tilgjengelig i tre modeller; uten hull, med hull og med forsterket hull
- Det plastforsterkede hullet forhindrer at sømmen rundt det distale hullet frynser seg
- Tre vidder; Narrow (20-23cm), Medium (23-31cm) og Wide (31-36cm)
- Fire lengder; 8, 10, 14 og 18 tommer

TRE MODELLER

TRE VIDDER

TRE TYKKELSER

FIRE LENGDER



ARTIKKELNUMMER

	Vidde	Tykkelse	Modell	Lengde i tommer
8030	Narrow = 2 Medium = 3 Wide = 4	1 ply 3 ply 5 ply	Ikke hull = 0 Hull = 2 Forsterket hull = 1	08, 10, 14 eller 18

Eksempel: 803043014 = Prosthetic Sock, Wide, 3 ply, uten hull, str 14"

STUMPSTRØMPER

Knite-Rite Nylon Stumpstrømper

KOMPONENT

BESKRIVELSE



Knit-Rite nylon stumpstrømper hjelper til med å kontrollere friksjon, justerer tykkelse, gir styrke og bedrer hudhelsen. Strømpene har påtrykket logo for å hjelpe pasienter med å ta på strømpen riktig for maksimal komfort.

Kommer i 4 modeller:

- «Prosthetic Sheat 100 % stretch nylon» kommer i fargene skumring eller hvit og fire bredder som tilsvarer stumpstrømpestørrelser. Selges i eske med 3 par.
- «Super Stretch Sheath» har 2% lycra i nylonen for å imøtekomme en enda større rekkevidde og mer tilpasset passform, forbedret fleksjon, bevegelse og forbedret hylsepassformen. Selges i eske med 3 par.
- «Silver Sheath» med X-Static® er lukthemmende og består av 91% nylon og 9% sølv. De transporterer også fuktighet bort fra huden og hjelper til med temperaturregulering. Kommer i 3 bredder og selges parvis.
- «Hole-In-Toe Sheath» Kommer i 2 bredder og selges i eske med 3 par.



Strømpene kan vaskes for hånd eller i maskin. Bruk mildt vaskemiddel uten blekemidler. Skyll grundig. Lufttørkes eller tørkes i tørketrommel på lav temperatur.

Se vår hjemmeside for artikkelnumre:



<https://alfimed.no/produkter/linere-og-sleeves/sto/knite-rite-nylon-p60244>

TILBEHØR SLEEVES & LINERS

ALPS Skin Reliever

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>ALPS Skin Reliever</p> <p>ALPS Skin Reliever eliminerer friksjon og forhindrer gnagsår på huden til amputasjonsstumpen. Den imøtekommer også stumpforandringer over protesens levetid.</p> <p>Det er ikke nødvendig å lage en ny hylse, ALPS Skin Reliever kan brukes under silikon og gel linere.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reduserer skjærkrefter og gnagsår• Høy elastisitet• Erstatter stumpstrømper• Mykner og beroliger huden• Inneholder en antioksidant for bruk på delikat hud	<p>803050011 10-19 cm</p> <p>803050012 20-27 cm</p> <p>803050013 28-37 cm</p> 

PadSil

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>PadSil ble utviklet for å øke bruker-komforten i kombinasjon med ALPS liners.</p> <p>Ved å øke distalt trykk og forbedre sirkulasjon i det distale vevet, vil de mer aktive amputerte sette pris på ekstra demping, mykhet og holdbarhet.</p> <p>Brukere som opplever volumendringer vil også sette pris på PadSils evne til å løfte stumpen tilbake til riktig posisjon.</p> <ul style="list-style-type: none">• Myk medisinsk silikon• Holder formen over tid• Bidrar til å opprettholde total kontakt• Kan modifieres 	<p>PadSil</p> <p>803061514 1,5mm XL</p> <p>803061515 1,5mm XXL</p> <p>803063011 3mm, Small</p> <p>803063012 3mm, Med.</p> <p>803063013 3mm, Large</p> <p>803063014 3mm, XL</p> <p>803063015 3mm, XXL</p> <p>Dummy</p> <p>803061154 1.5 XL</p> <p>803061155 1.5 XXL</p> <p>803061001 Small</p> <p>803061002 Medium</p> <p>803061003 Large</p> <p>803061004 XL</p> <p>803061005 XXL</p>

TILBEHØR SLEEVES & LINERS

Diverse tilbehør

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	Distal Cushion of Gel Liners MD	511701112
	KISS® Soft Edge Letter påkledning, Forhindrer at sleeveen ruller opp. Hindrer at sleeveen roterer. Sikrer lik plassering av sleeveen hver dag. Hindrer luftlekkasje distalt. Ingen taperester. 152 cm lang	516000331 Beige 516000332 Black
	KISS® WrapStrap-R® Proksimal hylsekant-beskytter. Selges enkeltvis	516000241 Beige 516000245 Black
	EncoreSleeve Protector Øker levetiden på sleeveen. Når den plasseres langs kanten på hylsen reduseres slitasje på gel-laget og forhindrer splittelse. Kommer i 11 størrelser: 23 cm (XS) 37 cm (L) 25 cm (XS+) 40 cm (L+) 27 cm (S) 43 cm (XL) 29 cm (S+) 49 cm (XXL) 31 cm (M) 55 cm (XXL) 34 cm (M+)	8230000XX XX = ønsket størrelse i cm
	UNI-GRIP Disse unike tekstilstripene med trykkfølsom lim-bakside gir allsidig anvendelse for proteser og ortoser ved behov. UNI-GRIPs forspente retningstekstur gir grep i den ene retningen mens den gir fri glid i den andre retningen. Noen av fordelene med produktet: • Begrenser rotasjonen av stumpen i AK-hylser • Oppheng for BK- og AK-hylser • Unngår stempling av stumpen i hylsen • Begrenser forflytting av ortosen	864850000

TILBEHØR SLEEVES & LINERS

ALPS Valve Integrated Pump (VIP)

KOMPONENT



BESKRIVELSE

Valve Integrated Pump (VIP) er en integrert luftutdrivingspumpe for forhøyet vakuüm i protesehylser. Bruken av VIP gir pasienter kontinuerlig total kontakt når de tar på seg protesen.

Dette er viktig for en jevn vektfordeling og for å fordele protesesuspensjonen over hele overflaten av gjenværende lem.

Forhøyet vakuüm opprettet av VIP stabiliserer stumpen, og overvinner alle problemer forbundet med stumpen som endrer volum i løpet av dagen.

- VIP er tilgjengelig med 2 forskjellige vakuümnivåer: Lavvakuüm eller Høyvakuüm
- Det er enkelt å installere i protesekontakten
- Det krever ikke bruk av batterier eller andre strømkilder.
- Den er stille, lett og påvirker ikke det kosmetiske utseendet på protesen
- For laminerte eller termoplastiske hylser



ARTIKKELNUMMER

803010001	Valve Integrated Pump, low vacuum
803010002	Valve Integrated Pump, high vacuum
803010003	Dummy for Valve Integrated Pump
803010004	Grace Plate for Valve Integrated Pump

alfimed

Alfimed AS, Olav Brunborgs vei 6, 1396 Billingstad
www.alfimed.no, Tlf. 31 29 68 86, Epost: info@alfimed.no